



Kopfschutzhelme



... schützt, was wertvoll ist!
...passgenau und
komfortabel!

Kopfschutzhelme

... aus Stoff oder Leder

Diese bewährten Programme dienen dem Schutz vor Kopfverletzungen bei unkontrollierten und unsicheren Bewegungsabläufen, die zu einem hohen Verletzungspotential führen können.

„Kids Protection“ / „Kids High Protection“ aus Stoff

Diese beiden Varianten sind aus Baumwollstoff gefertigt und mit einem speziellen Integral-Schaumstoff gepolstert. Zusätzlich wurde eine Folie eingearbeitet, durch die sich die Schlagfestigkeit des Schutzhelmes erheblich verbessert.

Durch den aufklettbaren Stirn- und Nackenschutz lässt sich der Kopfschutz optimal die vorhandenen Bedürfnisse anpassen. Das Programm wird in drei Farben (rot, grau, grün) und in vier Größen geliefert. Das Maß der einzelnen Größen kann aus der Tabelle auf dem Bestellblatt entnommen werden.

Voraussetzung für die optimale Sicherheit eines Kopfschutzhelmes ist die exakte Passform und die genaue Größe. Daher lässt sich bei diesem Programm der Kopfumfang bei jeder Größe um ca. 3 – 4 cm einstellen; zusätzlich kann man den Scheitelpunkt entsprechend den Gegebenheiten anpassen. Durch sein leichtes Gewicht und die gute Passform ist so optimaler Tragkomfort gewährleistet.

„Orient“ / „Willo“ aus Leder

Dieses Programm wird nach Maß aus hochwertigem Naturleder gefertigt. Durch eine eingearbeitete Hartschaumschale ist größtmöglicher Schutz und Sicherheit garantiert. Die Modelle „Orient“ und „Willo“ sind seit Jahren auf dem Markt bekannt und bewährt. Ihre Variationsmöglichkeiten sind aus der Praxis entwickelt und entsprechend optimiert worden.

Die Modell-Serie „Orient“ ist mit einer 1,5 cm starken Polsterung für Stirn und Nacken ausgestattet. Serienmäßig sind 3 gepolsterte Kopfriemen zum Schutz des Scheitels eingearbeitet. Beim Kopfschutzhelm „Orient extra“ sind zusätzlich beide Ohren geschützt.

Die Modell-Serie „Willo“ unterscheidet sich durch einen verstärkten Stirnschutz von 4,5 cm. Der Zusatz „Vario“ kennzeichnet Modelle, die zusätzlich zur Maßenfertigung die Möglichkeit bieten, den Kopfschutz in der Größe anzupassen und somit einen Wachstumsschub zu korrigieren.

Durch unser reichliches Zubehör ist eine optimale Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Benutzer gegeben. Zudem lösen wir im Sonderbau die außergewöhnlichsten Wünsche.



Kids Protection in Grün



Kids High Protection in Rot



Willo Super




Orient Extra



Willo Sport in Indischrot



Orient Sport in Lemongrün

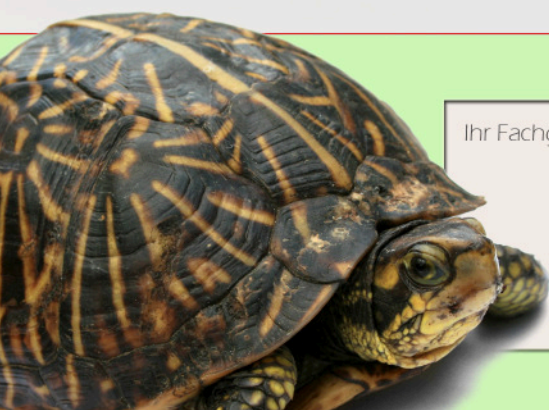

Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH
 Partenhauserweg 14
 81369 München
 ☎ +49 (0)89-7144176
 📠 +49 (0)89-78069309
 Bodenseestraße 25
 83059 Kolbermoor
 ☎ +49 (0)8031-2068044
 📠 +49 (0)8031-2069215
 ✉ info@hernik.de
 🌐 www.hernik.de
 Ust.-IdNr: DE201281298