

Hernik



Autokindersitz **STARFIGHT**

... ist flexibel, bequem und sicher

5-Punkt-Gurt mit Schnellverschluss

Verkleinerungsinlet: Sitztiefe nur 25 cm!

stabile Thoraxpelotten

viel innovatives Zubehör



Autokindersitz STARFIGHT

...flexibel, bequem und sicher!

Der STARFIGHT-NXT Kinderautositz ist ein für den Behindertenbereich entwickelter Autositz. Er eignet sich zum Einbau in die meisten handelsüblichen Fahrzeuge. Der Autositz ist zur Verwendung auf dem Rücksitz eines PKWs gebaut und setzt einen funktionierenden 3-Punkt-Sicherheitsgurt voraus.

Neben dem 3-Punkt-Gurt Ihres PKWs ist der STARFIGHT-NXT mit einem eigenen 5-Punkt-Brust-Schultergurt ausgestattet, der Ihrem Kind zusätzlichen Halt bietet. Dieser lässt sich zusammen mit der Kopfstütze in der Höhe einstellen.

Der Rückenwinkel ist auf 90° fixiert, jedoch kann der Autositz mit einer leichten (0° - 10°) oder erweiterter Sitz-Schrägverstellung (10° - 20°) ausgestattet werden, was bei Kindern mit eingeschränkter Rumpf- und Kopfkontrolle oft sehr wichtig ist.

Der STARFIGHT-NXT wurde speziell für sehr kleine Kinder entwickelt, weshalb ein **verstärktes, zweiteiliges Rückenpolster** die Sitztiefe reduziert.

Durch die Installation unseres XL-Kits kann der Autositz jedoch auch bei späterem Wachstum optimal verwendet werden - siehe ②

Ein Novum in dieser Klasse sind die optionalen **Thoraxpelotten**, die dem Kind eine stabile Sitzposition garantieren und flexibel einstellbar sind.





3



4



2

Ein sehr beliebtes Feature ist der innovative Drehadapter, der den Transfer des immer schwerer werdenden Kindes deutlich erleichtert. Dabei wurde der Drehpunkt aus der Mitte nach hinten und nach außen verlegt, um zu erreichen, dass sich der Stuhl während der Drehbewegung von der Rückenpolsterung des PKWs weg und zeitgleich dem Türausschnitt entgegen bewegt. Dabei wurde auf eine kompakte Konstruktion großen Wert gelegt: die Gesamthöhe des Sitzes wird nur 16 mm größer!

1 STARFIGHT-NXT grau, mit Drehmechanismus inkl. Auslöseknopf

2 STARFIGHT-NXT rot, mit optionalem XL-Kit und Thoraxpelotten

3 stufenlos und unabhängig voneinander verstellbare Thoraxpelotten

4 ISOFIX-Adapter zur stabilen Fixierung im Auto



...vielfältig, wie die Bedürfnisse Ihres Kindes

Der für den Reha-Bereich weiterentwickelte Autokindersitz STARFIGHT-NXT verfügt über eine große Vielzahl an optionalem Zubehör, mit dem individuelle Bedürfnisse des Kindes berücksichtigt werden können. Folgendes bieten wir an:


- zusätzliche Sitz-Schrägverstellung (10°; 20°)
- Drehadapter
- Thoraxpelotten aus Aluminium
- ISOFIX-Anbindung
- Aufprall- und Stützpolster
- Abduktionskeil
- Fußbank
- Sicherheitsgurtschlosspolster

Wichtig hierbei ist, dass kein Zubehör ein anderes ausschließt. Viele moderne Fahrzeuge sind mit ISOFIX ausgestattet, weshalb wir hier ein passendes Adaptersystem anbieten, um den Sitz optimal im Auto zu fixieren. Sehr komfortabel ist der nun mit nur einer Bewegung zu straffende 5-Punkt-Gurt, der den Alltag enorm erleichtert.

Da wir den STARFIGHT-NXT ständig weiterentwickeln, nehmen wir Anregungen und Vorschläge gern entgegen!



**Stütz- und
Sicherheitspolster**

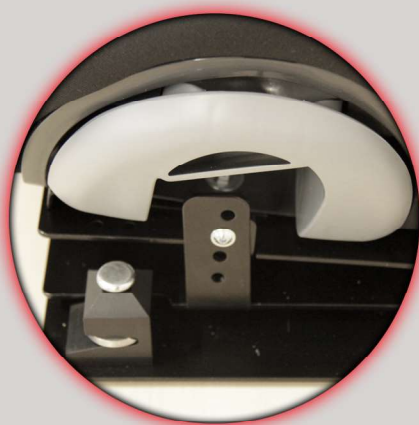

**stufenweise
Sitz-Schrägverstellung**



**Cupholder
beidseitig, ausklappbar**



**Fußbank winkel- und
höhenverstellbar**

Ihr Fachgeschäft

HERNIK GmbH
Auf der Gröb 2c
83064 Raubling
☎ +49 (0)8035-9580448
☎ +49 (0)8035-9580446
✉ info@hernik.de
🌐 www.hernik.de